

ES

Euronda

It's all about protection

Fundada en 1975, Euronda es una empresa italiana de carácter internacional, sinónimo de excelencia en la protección del sector médico. Con más de 250 empleados, una sede de 70.000 metros cuadrados, tres filiales en el extranjero y empresas asociadas en todo el mundo, hace acto de presencia en el mercado con líneas de productos específicos para la seguridad del sector dental y la protección tanto de trabajadores como de médicos y pacientes.

Monoart, la amplia gama de productos desechables que combina la máxima calidad con la vivacidad del color. **Pro System**, el sistema de esterilización que optimiza y controla todo el proceso. **Alle** es la línea de productos desechables para la creación de un área quirúrgica estéril y prevenir el riesgo de infecciones.

Para completar la oferta de protección integral, Euronda ha creado cinco líneas complementarias. **Eurosteril**, rollos y bolsas que garantizan la esterilidad a lo largo del tiempo. **Sanifizer**, productos para la limpieza y la desinfección de superficies, accesorios e instrumentos en la consulta dental. **Eyewear**, gafas de protección y viseras para operadores y pacientes, diseñadas y fabricadas para garantizar la máxima seguridad. **Studio**, una gama de productos y accesorios para satisfacer todas las necesidades diarias de odontólogos, auxiliares y pacientes. **Stools**, la línea de taburetes profesionales diseñados para satisfacer las distintas necesidades de las consultas.

Euronda, formada por un equipo dinámico, combina un amplio conocimiento del mercado con la innovación continua de Materials, procesos y tecnologías para satisfacer las necesidades del sector y optimizar las fases de trabajo de conformidad con la normativa, especialmente en relación con el impacto medioambiental de los productos y procesos.



Índice

Limpieza

- 8 Eurosafes 170
- 10 Eurosafes 60
- 12 Accesorios
- 16 Eurosafes Smart
- 18 Eurosonic 4D
- 20 Eurosonic 3D
- 22 Eurosonic Energy
- 23 Accesorios

Acondicionamiento

- 26 Euromatic
- 28 Euroseal Valida
- 30 Euroseal
- 32 Euroseal Infinity

Esterilización

- 34 Tecnologías y soluciones de los autoclaves Euronda Pro System
- 36 E10
- 38 E9
- 40 EXL
- 42 E8
- 44 E-Memory
- 46 Accesorios
- 48 Test de control

Tratamiento del agua

- 50 Aquaosmo
- 52 Aquafilter 1 to 1
- 53 Aquadist

Euronda Eurosteril

- 56 Rollos de esterilización
- 57 Bolsas de esterilización

Euronda Sanifizer

- 60 Sanifizer Enzymatic
- 61 Sanifizer Neutralizer
- 62 Sanifizer Instruments
- 64 Sanifizer Automatic
- 66 Sanifizer Surfaces
- 67 Sanifizer Wipes

Euronda Stools

- 71
- 72 Taburete CDS301
- 73 Taburete Coral
- Taburete Onyx

Euronda Pro System

Product, Process, Protection



Limpieza



Desinfección

Eurosafe 170
Eurosafe 60
Eurosafe Smart



Lavado con ultrasonidos

Eurosonic 4D
Eurosonic 3D
Eurosonic Energy



Termosellado

Euromatic
Euroseal Valida
Euroseal
Euroseal Infinity

Euronda Pro System es el sistema de protección desarrollado para garantizar un protocolo de reacondicionamiento del instrumental completo y eficaz para proteger la seguridad de los operadores, los pacientes y el entorno de trabajo.

La esterilización es un proceso que se divide en varias fases y sus buenos resultados dependen de la correcta ejecución de cada una de ellas, desde la recogida hasta el almacenamiento. Gracias a la línea Euronda Pro System, se puede aplicar de forma sencilla un protocolo avanzado y trazable, eficaz y reproducible en el tiempo que aumente la seguridad y optimice los recursos de la clínica dental.



Esterilización



Autoclaves

E10
E9
EXL
E8



Tratamiento del agua

Aquaosmo
Aquafilter 1 to 1
Aquadist



Test de control



Potente

Los dos brazos giratorios están colocados de tal manera que todos los niveles de la espaciosa cámara de lavado reciban un potente flujo doble de agua, desde arriba y desde abajo, con un total de cuatro puntos de lavado.



Totalmente equipado

Incluye de serie todos los accesorios necesarios para optimizar la carga: carro de carga superior e inferior, inserto para instrumental, cesta de 1 DIN, dos insertos para bandejas de ocho posiciones y portafresas.



Gran capacidad

La cámara de lavado de 170 litros en acero inoxidable AISI 316L, puede alojar hasta cuatro cargas completas de un autoclave de 24 litros, lo que equivale a más de 140 piezas de instrumental más turbinas, puntas de eliminadores de sarro y fresas.



Secado activo

El secado, mediante la inyección de aire caliente desde diferentes puntos del interior de la cámara de lavado, permite eliminar por completo los depósitos de agua en el exterior y el interior del instrumental de cuerpo hueco.



Eurosafe 170

Limpieza automática, ex tragrande

Termodesinfectadora ideal para clínicas con un elevado número de pacientes: limpia, desinfecta, enjuaga y seca el instrumental en un único y rápido proceso automatizado, eliminando la necesidad de limpieza manual. Garantiza excelentes resultados gracias al sistema de lavado por inyección con brazos independientes para cada nivel y al secado por aire forzado que elimina los depósitos de agua.

Permite elegir tres ciclos favoritos entre los 20 preconfigurados para combinar con los botones situados debajo de la pantalla en color de 3,5". Además, se pueden crear ciclos personalizados en función de las necesidades específicas del material que se debe tratar, ajustando la duración y la temperatura de lavado. Está equipado con un ablandador integrado que permite el uso de agua corriente y controla la correcta regeneración de las resinas, avisando en caso de falta de sal. El dosificador automático calibra e inyecta los dos líquidos detergentes, colocados fuera de la termodesinfectadora, de forma independiente y sin desperdicios innecesarios.

Al final de cada ciclo, crea un archivo que se puede transferir a un ordenador mediante un dispositivo USB, que muestra todos los datos del proceso (tiempo, temperatura, número de ciclo) y también valida la carga. Además, gracias a los accesorios opcionales, los datos pueden transferirse a través de la conexión Ethernet o imprimirse gracias a la impresora térmica.

Accesorios incluidos

USB, prueba de conductividad del agua, sal regeneradora (1 kg), carro de carga superior, carro de carga inferior, dos insertos para bandejas de ocho posiciones, cesta de 1 DIN, inserto para instrumental, portafresas.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase IIb



Dimensiones

60 x 84 x 63 cm (l x al. x an.)



Peso

90 kg



Capacidad de la cámara

170 L



Tensión de alimentación

Monofásica 220 V / 50 Hz
Trifásica 380 V / 50 Hz

Potencia absorbida
2700 W (220 V) 5600 W (380 V)

Conectividad

Incluye: USB y software
E-Memory Opcional:
Datalogger



CE Ref

DS 500 CDL





Seguro

Aumenta la seguridad en el trabajo al reducir la manipulación del instrumental contaminado y, en consecuencia, los riesgos para el operador. La automatización del proceso de limpieza también permite que este paso sea fácilmente repetible y trazable.



Eficiente

Al procesar el instrumental en tan solo 60 minutos, ahorra un tiempo considerable a la clínica, ya que reduce el tiempo dedicado a la limpieza manual del instrumental y permite a los operadores centrarse en tareas de mayor valor.



Optimizado

La cámara de lavado de 60 litros en acero inoxidable AISI 316L puede alojar hasta dos cargas completas de un autoclave de 24 litros. Los líquidos detergentes se colocan en el práctico compartimento que ayuda a ahorrar espacio, mientras que los numerosos accesorios suministrados permiten manipular mejor el instrumental y los casetes.



Secado activo

El secado, mediante la inyección de aire caliente desde diferentes puntos del interior de la cámara de lavado, permite eliminar por completo los depósitos de agua en el exterior y el interior del instrumental de cuerpo hueco.



Eurosafe 60

Limpieza automática, todo en uno

Termodesinfectadora ideal para clínicas pequeñas y medianas: limpia, desinfecta y seca el instrumental en un único proceso automatizado, eliminando la necesidad de limpieza manual. Garantiza excelentes resultados de limpieza gracias al sistema de lavado por inyección con brazos rociadores independientes para cada nivel y secado por aire forzado que elimina los depósitos de agua.

Permite elegir tres ciclos favoritos entre los 20 preconfigurados para combinar con los botones situados debajo de la pantalla en color de 3,5", para que puedan estar disponibles inmediatamente. Además, se pueden crear ciclos personalizados en función de las necesidades específicas del material que se debe tratar, ajustando la duración y la temperatura de lavado.

Está equipado con un ablandador integrado que permite el uso de agua corriente y controla la correcta regeneración de las resinas, avisando en caso de falta de sal.

La termodesinfectadora, al final de cada ciclo, crea un archivo que se puede transferir a un ordenador mediante un dispositivo USB, que muestra todos los datos del proceso (tiempo, temperatura, número de ciclo) y también valida la carga. Además, gracias a los accesorios opcionales, los datos pueden transferirse a través de la conexión Ethernet o imprimirse gracias a la impresora térmica. Se conecta a la red eléctrica con la clásica toma de 220 V (no requiere toma trifásica).

Accesorios incluidos

USB, prueba de conductividad del agua, sal regeneradora (1 kg), cesta de carga estándar, inserto de ocho posiciones, inserto para instrumental, portafresas.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase IIb



Dimensiones

56 x 82,5 x 58 cm (l x al. x an.)



Peso

62 kg



Capacidad de la cámara

60 L



Tensión de alimentación

230 V / 50 Hz

Potencia absorbida

2750 W

Conectividad

Incluye: USB y software E-Memory
Opcional: Datalogger



CE Ref

Eurosafe 60 D





Accesorios

Detergentes



Sanifizer Enzymatic

Detergente enzimático para la termodesinfección. Indicado para eliminar sangre, residuos de tejidos y contaminantes orgánicos de los Productos Sanitarios.



Duración

36 meses



Envase

Bidón de 5 litros



Sanifizer Neutralizer

Agente líquido con acción neutralizante y limpiadora para sistemas de lavado automático, Productos Sanitarios y material de vidrio de laboratorio. Facilita el secado y reduce la formación de opacidad.



Duración

36 meses



Envase

Bidón de 5 litros



Sal regeneradora

Sal para el tratamiento del agua en la termodesinfectadora, evita los depósitos de cal y asegura el buen funcionamiento de la termodesinfectadora.




Envase

Bolsa de 1 kg

Accesorios

Cestas y carros de carga

Eurosafe 170

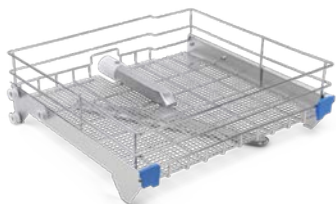

Carro de carga superior

Carro superior con brazos giratorios de acero inoxidable indicado para colocar insertos para casetes y cestas para instrumental y fresas.



Dimensiones de la superficie de carga

51 x 9,5 x 48 cm (l x al. x an.)



Carro de carga inferior

Carro inferior de acero inoxidable indicado para casetes y cestas para instrumental y fresas.



Dimensiones de la superficie de carga

50,5 x 4 x 49,5 cm (l x al. x an.)



Carro de carga superior con dieciséis soportes para instrumental

Carro equipado con conexiones especiales para la termodesinfección del instrumental.



Dimensiones de la superficie de carga

51 x 4,5 x 48 cm (l x al. x an.)



Cesta de carga estándar

Cesta de acero inoxidable indicada para colocar insertos para casetes y cestas para instrumental y fresas.



Dimensiones de la superficie de carga

37 x 8 x 39,5 cm (l x al. x an.)



Cesta de carga con cuatro soportes para instrumental, cinq inyectores para cuerpos huecos y dos conexiones para tubos de aspiración



Dimensiones de la superficie de carga

32 x 12 x 39,5 cm (l x al. x an.)



Cesta de carga con seis soportes para instrumental y seis inyectores para cuerpos huecos



Dimensiones de la superficie de carga

32 x 12 x 39,5 cm (l x al. x an.)




Cesta de carga con ocho soportes para instrumental



Dimensiones de la superficie de carga

32 x 8 x 39,5 cm (l x al. x an.)

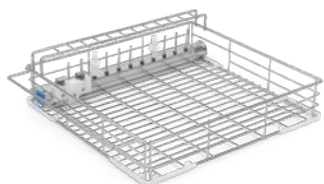

Cesta de carga con once inyectores para cuerpos huecos y dos conexiones para tubos de aspiración



Dimensiones de la superficie de carga

32 x 8 x 39,5 cm (l x al. x an.)

Accesorios

Cestas e insertos




Inserto para instrumental

Inserto para instrumental en posición vertical.
37 x 12 x 12 cm (l x al. x an.)



Portafresas

Cesta indicada para el lavado de fresas y piezas pequeñas. 10 x 4 x 10 cm (l x al. x an.)

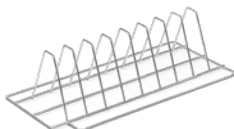

Inserto de ocho posiciones

Inserto para bandejas y casetes de ocho plazas (paso de 4 cm).
18 x 11 x 39 cm (l x al. x an.)



Inserto de cuatro posiciones

Inserto para bandejas y casetes de cuatro plazas (paso de 3,5 cm).
25 x 8 x 38,5 cm (l x al. x an.)



Inserto de dos posiciones

Inserto para bandejas y casetes de dos plazas (paso de 5 cm).
25 x 18 x 38,5 cm (l x al. x an.)



Cesta de 1/2 DIN

Cesta de alambre, indicada para tijeras, pinzas y espejos.
25 x 5 x 24 cm (l x al. x an.)



Cesta de 1 DIN

Cesta de alambre, indicada para grandes cantidades de instrumentos sueltos. 48,5 x 50 x 25 cm (l x al. x an.)

Adaptadores



Para instrumental

Permite una limpieza profunda de los canales internos del instrumental mediante la circulación del agua.



Para puntas de eliminadores de sarro

Compuestos por 1 rosca interna M3x0,35 y 1 M3,5x0,6, 1 rosca externa M3x0,5, 1 inyector para cuerpos huecos y 1 conector para insertar 3 adaptadores.



Para cánulas y cuerpos huecos en general

Compuestos por 1 filtro de acero inoxidable, 1 tapón de cierre, 1 junta Ø 19-21 y 1 Ø 14-17, 1 cuerpo principal y 1 anillo superior.



Para turbinas

De aluminio macizo, están disponibles para una amplia gama de modelos de turbinas.

Compatibilidad de los accesorios

	Eurosafe 170			Eurosafe 60	
	Carro de carga superior	Carro de carga inferior	Carro de carga superior con dieciséis soportes para instrumental	Cesta de carga estándar	Cestas de carga con soportes para instrumental, inyectores o tubos de aspiración*
Inserto para instrumental	✓	✓	✓	✓	✓
Portafresas	✓	✓	✓	✓	✓
Inserto de ocho posiciones	✗	✓	✗	✓	✓
Inserto de cuatro posiciones	✗	✗	✓	✗	✗
Inserto de dos posiciones					
Cesta de ½ DIN					
Cesta de 1 DIN					
Adaptadores para instrumental					
Adaptadores para puntas de eliminadores de sarro					
Adaptadores para cánulas y cuerpos huecos en general	✗	✗	✓	✗	✓
Adaptadores para turbinas					

* Los accesorios son compatibles con todos los modelos de cesta de carga disponibles: con soportes para instrumental, inyectores para cuerpos huecos y conexiones para tubos de aspiración (véase la página 15).



Optimizado

Gracias a su cuba de lavado de 10 litros puede alojar hasta una carga completa de un autoclave de 24 litros. El cestillo y la bandeja, ambos incluidos, pueden colocarse uno encima del otro para aprovechar al máximo el espacio dentro de la cuba. Todo en un dispositivo de mesa que permite maximizar la operatividad a la vez que reduce al mínimo el espacio ocupado.



Fácil de usar

La pantalla táctil de 4,3" ofrece una interfaz sencilla e intuitiva que permite iniciar los ciclos con sólo unos clics. También permite elegir entre tres programas preestablecidos (prelavado, estándar, intensivo) y seis para la limpieza por ultrasonidos, con la posibilidad de personalizar la duración, la temperatura y el secado de cada ciclo según las necesidades.



Trazable

El sistema de trazabilidad digital permite controlar fácilmente todos los ciclos realizados y guardar los resultados en un dispositivo USB o transferirlos a un ordenador mediante conexión Ethernet. También se pueden habilitar hasta 20 usuarios previa introducción de una contraseña.



Todo en uno

Lleva a cabo en un único ciclo prelavado, lavado y secado, eliminando la necesidad de realizar una limpieza manual y garantizando resultados más eficaces en menos tiempo y con menos riesgos para el operador. El secado por aire caliente forzado también garantiza la eliminación completa de los depósitos de agua.



Eurosafe Smart

Limpieza automática, a medida de la clínica



Cuba multifuncional de mesa, ideal para clínicas que deseen optimizar y automatizar el proceso de limpieza y desinfección del instrumental.

Eurosafe Smart limpia, aclara y seca el instrumental en un proceso rápido, automatizado, repetible y Trazable. Además, utilizada en combinación con el desinfectante y detergente multienzimático Sanifizer Automatic, combina la eficacia del lavado con ultrasonidos con la limpieza y desinfección de la carga, respetando plenamente los materiales.

Ofrece la posibilidad de elegir entre tres programas preestablecidos y seis programas de lavado con ultrasonidos, así como la posibilidad de personalizar determinados parámetros del ciclo.

Equipada con un sistema de cartuchos intercambiables para la carga de Sanifizer Automatic, colocados en un práctico compartimento que ayuda a ahorrar espacio, garantiza facilidad de uso y seguridad para el operador. El dosificador contra desperdicios de detergente inyecta automáticamente el líquido en función del programa y la carga, mientras que el ablandador integrado controla la correcta regeneración de las resinas, informando en caso de falta de sal.

Al final de cada ciclo, la cuba multifunción crea un archivo que se puede transferir a un ordenador mediante un dispositivo USB, que muestra todos los datos del proceso (resultado, duración, cantidad de detergente y operador). Además, los datos se pueden transferir a través de una conexión Ethernet y gestionarse mediante el software E-Data y E-Memory.

Accesorios incluidos

USB, sal regeneradora (1 kg), cestillo, bandeja.

Accesorios en opción

Portafresas, soportes de silicona para espejos.

Limpieza



Clasificación

Producto Sanitario de Clase I



Dimensiones

46 x 45,5 x 61 cm (l x al. x an.)



Peso

45 kg



Capacidad de la cámara

10 L



Tensión de alimentación

230 V / 50 Hz

Potencia absorbida

2300 W

Conectividad

Incluidos: USB y Ethernet

CE Ref

UWU\M10L2024





Equipada

Equipada de serie con cestillo de acero inoxidable perforada y tapa indeformable con sistema antigoteo. Becher y soporte para becher opcionales para lavar instrumental pequeño, como fresas o prótesis.



Inmediata

Intuitiva y fácil de usar gracias al controlador retroiluminado de LED y al camino de luz que proporciona información sobre el estado del lavado, guiando al operador con un simple vistazo, incluso a distancia.



Ergonómica

Prácticas asas laterales y grifo en la parte trasera para facilitar el desplazamiento y el vaciado.



Versátil

Permite elegir entre seis ciclos preconfigurados o personalizar el ciclo ajustando la temperatura hasta 60 °C y el tiempo de 10 a 40 minutos.



Eurosonic 4D

La nueva dimensión del lavado con ultrasonidos

Cuba para el lavado con ultrasonidos equipada con pantalla con controlador retroiluminado de LED. Intuitiva y fácil de usar gracias a las indicaciones luminosas asociadas a los diferentes ciclos, tiempos y temperaturas.

Resistente y fiable, gracias a su cuba de acero inoxidable AISI 304L, Eurosonic 4D permite elegir entre seis ciclos preconfigurados y un ciclo libre personalizable en cuanto al tiempo y la temperatura. Los ciclos preconfigurados funcionan a través de cinco fases: calentamiento del líquido, desgasificación, eliminación de las partículas más gruesas, limpieza del material mediante la acción combinada del microcepillado y los detergentes, y la fase final que distribuye uniformemente las ondas ultrasónicas para una limpieza más uniforme.

Equipada con tecnología Sweep Mode que distribuye uniformemente las ondas ultrasónicas para una limpieza más uniforme.

Accesorios incluidos

Tapa ahumada indeformable antigoteo y cestillo de acero inoxidable perforado



Dimensiones

33,5 x 26 x 20,5 cm
(l x al. x an.)



Peso

5 kg (con cestillo y tapa)



Capacidad

3,8 L



Tensión de alimentación

220-230 V | 50/60 Hz

Potencia absorbida

300 W



Ciclos

preconfigurados

Instrumental: 20 min a 40 °C

Fresas: 10 min a 40 °C

Cubeta de impresión: 40 min a 60 °C

Eliminación de cemento: 10 min a 30 °C

Eliminación de yeso: 30 min a 60 °C

Prótesis: 40 min a 60 °C



Sencilla

Permite ajustar manualmente la duración del ciclo de limpieza de 5 a 30 minutos. También se puede ajustar la temperatura de trabajo eligiendo entre 60 °C y 35 °C o iniciar un ciclo sin calentamiento.



Equipada

La tapa fonoabsorbente con sistema antigoteo suministrada protege al operador contra posibles salpicaduras y aerosoles, evitando la contaminación de la zona de trabajo y reduciendo el ruido producido por las ondas ultrasónicas.



Inteligente

El LED central proporciona información inmediata sobre el estado del lavado indicando en cualquier momento en qué punto del ciclo se encuentra.



Eficaz

La tecnología Sweep Mode aumenta la eficacia mecánica de la cavitación y garantiza una limpieza más uniforme gracias a la distribución homogénea de las ondas ultrasónicas dentro de la cuba.



Eurosonic 3D

La elección más equilibrada para el lavado con ultrasonidos

Cuba para el lavado con ultrasonidos con temperatura de trabajo preestablecida de 60 °C y tiempo ajustable hasta 30 minutos.

Eurosonic 3D ofrece la máxima facilidad de uso gracias a los prácticos botones frontales y a la información luminosa sobre el estado del ciclo y el funcionamiento correcto.

Su resistente cuba de acero inoxidable (AISI 304L) y sus cómodas asas laterales facilitan las operaciones de vaciado, mientras que la tecnología Sweep Mode garantiza una limpieza eficaz y uniforme.

Accesorios incluidos

Tapa ahumada indeformable antigoteo y cestillo de acero inoxidable perforado.



Dimensiones

27 x 24 x 19,5 cm
(l x al. x an.)



Peso

3,7 kg (con cestillo y tapa)



Capacidad

2,7 L



Tensión de alimentación

220-230 V | 50/60 Hz

Potencia absorbida

280 W

Eurosonic Energy

El lavado con ultrasonidos seguro y accesible



Cuba de ultrasonidos con temporizador mecánico que permite ajustar la duración del ciclo de limpieza de 5 a 30 minutos.

Resistente, con armazón de acero inoxidable AISI 304L y tapa indeformable con sistema antigoteo, dispone de asas laterales para facilitar las operaciones de vaciado y un panel de control eficaz e intuitivo.

Equipada con tecnología Sweep Mode que distribuye uniformemente las ondas ultrasónicas para una limpieza profunda y uniforme.

Accesorios incluidos

Tapa ahumada indeformable antigoteo y cestillo de acero inoxidable perforado.



Dimensiones

27 x 24 x 22 cm
(l x al. x an.)



Peso

3,7 kg (con cestillo y tapa)



Capacidad

2,7 L



Tensión de alimentación

230 V | 50/60 Hz

Potencia absorbida
80 W



Rápida

Permite empezar a limpiar el instrumental sin necesidad de precalentar la cuba.



Sencilla

Un solo gesto es suficiente para iniciar el ciclo de limpieza de forma rápida y intuitiva.



Inteligente

Las luces indicadoras indican en cualquier momento el estado del ciclo de limpieza o cualquier error o anomalía en su uso.

Accesorios

Todos modelos



Tapa

Tapa ahumada indeformable antigoteo.

Eurosonic 4D: 31,5 x 16,5 cm (l x an.)

Eurosonic 3D y Energy: 25 x 15 cm (l x an.)



Cestillo

Cestillo de acero inoxidable perforado.

Eurosonic 4D: 28 x 5,5 x 13 cm

(l x al. x an.)

Eurosonic 3D y Energy:

21,5 x 5,5 x 12,5 cm (l x an.)



Becher

Becher de vidrio graduado con capacidad de 0,6 litros y anillo de goma, ideal para lavar instrumentos giratorios. 10 x 12,5 cm (Ø x al.)

Eurosonic 4D



Soporte individual para becher

Cestillo de acero inoxidable con alojamiento para un becher.

Simplifica la introducción y extracción de los bechers.

10 x 5,5 x 13 cm (l x al. x an.)



Soporte triple para becher

Cestillo de acero inoxidable con alojamiento para tres bechers.

Permite limpiar diferente instrumental durante el mismo ciclo de lavado. 28 x 2 x 14,5 cm (l x al. x an.)

Eurosonic 3D y Eurosonic Energy



Soporte doble para becher

Soporte para dos bechers de policarbonato. Permite la limpieza por separado de objetos pequeños durante el mismo ciclo de lavado. 25,5 x 2 x 15,5 cm (l x al. x an.)



Equipada

Con una gama completa de accesorios para mejorar su facilidad de uso, como la superficie frontal deslizante y el portarrollos con cortadora de mesa.



Segura

Una alarma sonora avisa al operador en caso de necesidad y la función de espera se activa automáticamente cuando la máquina no se está utilizando.




Ajustable

Se puede ajustar la temperatura con el panel de mandos para un sellado óptimo con cualquier tipo de material.



Trazable

La impresora integrada imprime directamente en la bolsa. Toda la información se puede transferir a un ordenador a través de USB, tarjeta SD y conexión Ethernet de serie gracias al software gratuito E-Memory.

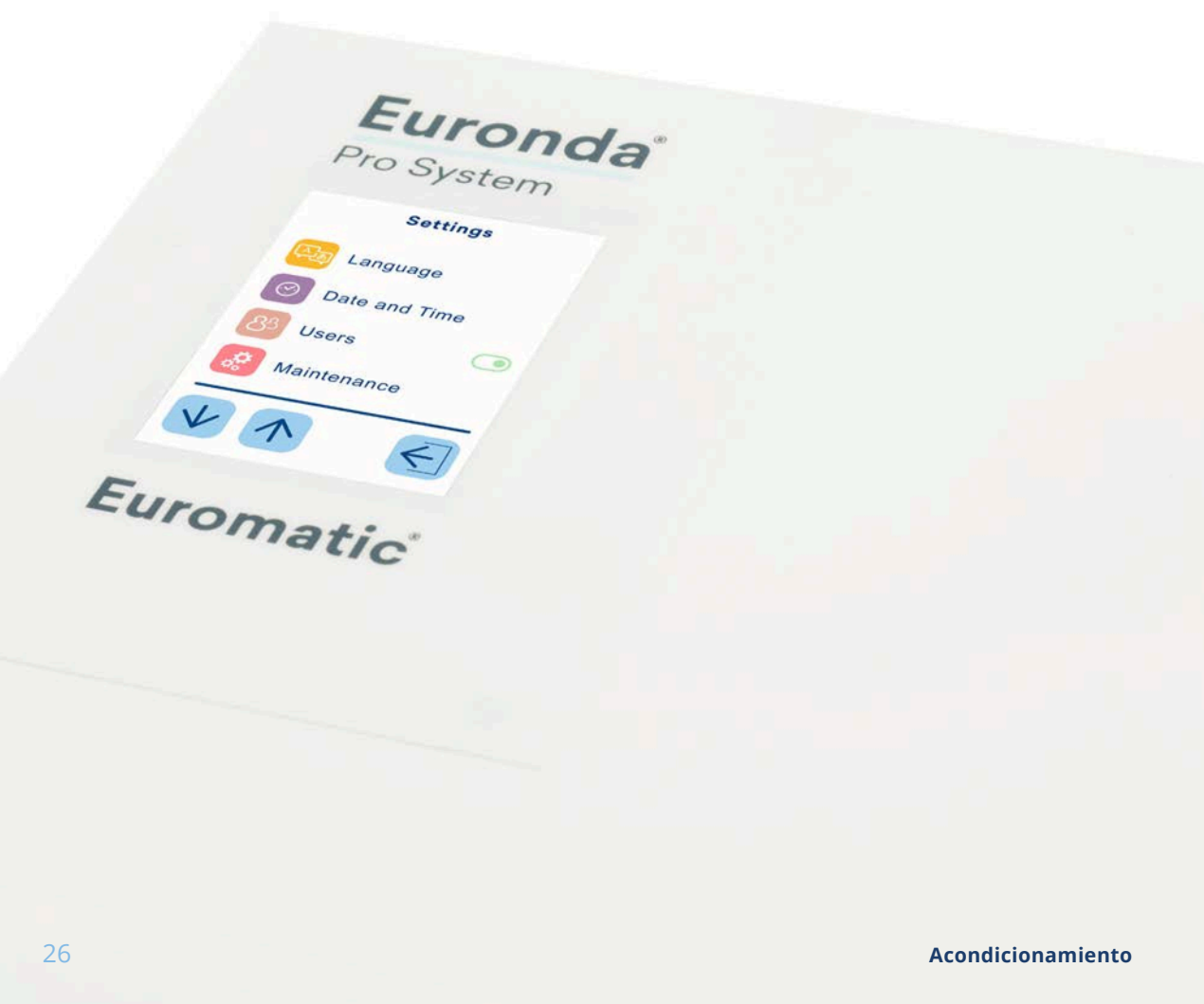

Euromatic

Simplifica, agiliza y realiza el seguimiento del trabajo



Termoselladora giratoria de validación ideal para clínicas con grandes cantidades de bolsas para sellar. Valida todas las bolsas selladas, para garantizar el máximo ahorro de tiempo gracias al sellado multibanda a una velocidad de 8 metros por minuto.

La amplia pantalla táctil de 2,8" posee una interfaz fácil de usar que guía de forma clara y rápida para la elección de las funciones del menú. Además, la pantalla tiene un tratamiento especial que repele e impide la proliferación de bacterias.

Equipada con impresora integrada, muestra directamente en la bolsa los parámetros útiles para la trazabilidad (datos de producción, lote, operador y fecha de caducidad). Toda la información sobre el sellado se puede transferir al ordenador por medio de una llave USB, tarjeta SD y de la conexión Ethernet de serie.



Dimensiones

51 x 21,5 x 24 cm
(l x al. x an.)



Peso

14 kg



Banda de sellado

1,25 cm (doble banda)



Tensión de alimentación

200-240 V | 50/60 Hz

Potencia absorbida

500 W

Temperatura de sellado

30-200°C



Conectividad

Incluidos: Ethernet,
tarjeta SD, USB, software
E-Memory y E-Data





Fácil de usar

La pantalla permite seleccionar la temperatura de sellado y proporciona información en tiempo real sobre la eficacia de las operaciones. Gracias a las señales acústicas, minimiza el riesgo de errores.



De validación

Valida el sellado, confirmando su éxito y guardando los datos pertinentes (tiempo, temperatura, presión) en una tarjeta SD, que se pueden transferirse a un ordenador a través de Ethernet o WiFi (opcional).



Práctica

Superficie de apoyo ergonómica y tapa de policarbonato para una inspección visual constante de la zona de sellado.



Versátil

El portarrollos patentado de doble nivel y altura ajustable se puede fijar a la pared, lo que reduce al mínimo el espacio necesario para su uso.



Euroseal Valida

Trazabilidad digital en cada sellado



Termoselladora de validación de diseño ergonómico que garantiza resistencia y versatilidad, además de seguridad y una extrema facilidad de uso. La cortadora integrada y la palanca de sellado situadas en la parte frontal optimizan la ergonomía y la seguridad, facilitando las operaciones de envase y sellado.

La pantalla táctil en color de 4" con interfaz fácil de usar que permite al usuario configurar de forma rápida e intuitiva el idioma, la fecha, la hora, los operadores y la temperatura de sellado.

Permite validar cada bolsa de forma individual, memorizando en una tarjeta SD los datos relativos al sellado y el resultado de las operaciones llevadas a cabo. También se puede conectar directamente al ordenador a través de Ethernet y WiFi (opcional) para una transferencia inmediata de los datos del envase.



Dimensiones (l x al. x an.)

Estándar: 50 x 31,5 x 49 cm
Con portarrollos de pared:
50 x 20 x 49 cm
Con portarrollos doble:
50 x 42 x 49 cm



Peso

8,5 kg



Banda de sellado

1,2 cm



Tensión de alimentación

200-240 V | 50/60 Hz

Potencia absorbida

180 W

Temperatura de sellado

170-200°C



Conectividad

Incluidos: Ethernet, tarjeta SD, software E-Memory y E-Data
Opcional: WiFi





Ergonómica

La cortadora y la palanca de sellado situadas en la parte frontal optimizan la ergonomía y la seguridad, facilitando las operaciones de acondicionamiento y sellado.



Robusta

Garantiza una eficacia y fiabilidad duraderas gracias a la calidad de sus materiales de fabricación y a un diseño estudiado al detalle.



Versátil

El portarrollos puede ajustarse en dos posiciones: inferior, para agilizar la selección y el cambio de rollo, y superior, si se desea fijar la máquina a la pared.



Compacta

Las dimensiones de la máquina son reducidas y permiten colocarla cómodamente sobre la mesa, también en posición vertical con el kit para su instalación en la pared.



Euroseal Infinity

Una selladora es para siempre



Termoselladora de mesa práctica, resistente, fiable y fácil de usar. Su diseño compacto y funcional se ha estudiado al detalle para minimizar el espacio necesario para su uso, característica que se implementa con la posibilidad de colgar la selladora en la pared para su uso vertical.

Equipada con un sistema que mantiene el rodillo siempre dentro del campo de sellado. Su superficie lisa facilita y mejora la limpieza.



Dimensiones

43 x 21,5 x 43 cm
(l x al. x an.)



Peso

7 kg



Banda de sellado

1,2 cm



Tensión de alimentación

200-240 V | 50/60 Hz

Potencia absorbida

180 W

Temperatura de sellado

170-200°C



Euroseal

La termoselladora a escala humana

Termoselladora de mesa ergonómica, resistente y fácil de usar. Equipada con tapa de policarbonato transparente para llevar a cabo las operaciones de sellado con mayor precisión y de un portarrollos especial patentado que puede ajustarse en altura y profundidad y colgarse de la pared para adaptarse a todos los espacios de trabajo.

La superficie de apoyo integrada facilita las operaciones de sellado y permite trabajar de forma más funcional. Dispone de sistema de bloqueo antirretorno del rollo.



Dimensiones(l x al. x an.)

46 x 31,5 x 39 cm
Con portarrollos de pared:
46 x 20 x 30 cm
Con portarrollos doble:
46 x 42 x 39 cm



Peso

7 kg



Banda de sellado

1,2 cm



Tensión de alimentación

200-240 V | 50/60 Hz



Potencia absorbida

100 W

Temperatura de sellado

170-200°C



Multiusos

Portarrollos patentado, ajustable en altura con posibilidad de colgar en la pared.



Práctica

Espaciosa superficie de apoyo para trabajar de forma fácil, práctica y cómoda.



Segura

Sistema de bloqueo antirretorno y antiquemaduras, además de señales acústicas y luminosas.

Accesorios

Euromatic



Superficie de apoyo

Superficie de apoyo frontal de acero inoxidable ajustable en altura, facilita las operaciones de sellado de las bolsas.

52 x 7,5 x 24 cm (l x al. x an.)



Superficie deslizante con rodillos

Transportador de rodillos de aluminio, ajustable en altura. Facilita el apoyo y el deslizamiento de las bolsas durante el envase.

61,5 x 5,5 x 30 cm (l x al. x an.)



Portarrollos con cortadora

Portarrollos de mesa de acero inoxidable con cortadora integrada y deslizamiento bidireccional, permite cortar los rollos para esterilización en la longitud deseada.

50,5 x 18 x 31,5 mm (l x al. x an.)

Euroseal Valida



WiFi

Tarjeta SD para compartir de forma inalámbrica los datos obtenidos por el dispositivo con cualquier ordenador, tableta o smartphone.

Euroseal Infinity



Kit de fijación vertical

Kit para el montaje en la pared de Euroseal Infinity compuesto por dos soportes y los tornillos correspondientes.

Todos los dispositivos



Euroseal Check

Test de control para termoselladoras para comprobar el sellado correcto de los rollos. Paquete individual de 100 pruebas.

Tecnologías y soluciones Euronda Pro System

Eficacia y fiabilidad en una sola plataforma

Los autoclaves Euronda Pro System se desarrollan en una plataforma común que garantiza la eficacia, fiabilidad, seguridad y facilidad de uso en todos los modelos de la gama .

Todos los autoclaves comparten la misma estructura modular, sistemas optimizados de control y gestión, accesorios y piezas de repuesto.





Sistema modular

La estructura modular de los autoclaves Euronda Pro System permite desmontar fácilmente los paneles laterales y facilitar así su mantenimiento.



Generador de vapor

Garantiza un excelente rendimiento en cuanto a velocidad, seguridad y esterilización. Mejora el consumo de agua al ajustarlo en función de la carga y, en sinergia con las resistencias, ofrece un secado perfecto.



Inspection System

El sistema de inspección para autoclaves que cumple plenamente la norma EN 13060. Inspection System facilita y agiliza las operaciones de limpieza de los depósitos.



Separador aire-agua

Actúa como protección de la bomba de vacío, evitando que los residuos de suciedad, aceites lubricantes y vapor dañen sus componentes internos, manteniendo así su eficacia y fiabilidad a lo largo del tiempo.



Conductímetro

El sensor de conductividad integrado controla constantemente la calidad del agua, evitando posibles fallos de funcionamiento debidos al uso de agua inadecuada.



Dirt Control System

El sistema de gestión de la suciedad del circuito hidráulico permite separar con precisión los flujos de agua limpia y sucia para que el autoclave pueda seguir funcionando con la máxima eficacia.



Sistema de refrigeración inteligente

El sistema de refrigeración está equipado con una sonda que permite controlar la bomba de vacío de la forma más eficiente, para garantizar a lo largo del tiempo una mayor vida útil y eficacia.





Interfaz intuitiva

La interfaz se ha diseñado con una lógica sencilla e intuitiva. El inicio rápido de los ciclos mediante deslizamiento, la posibilidad de personalizarlos en unos pocos clics y los tutoriales en vídeo que guían al usuario en las pequeñas intervenciones rutinarias de mantenimiento facilitan el uso diario del dispositivo.



Trazable

Los datos de esterilización pueden guardarse en un dispositivo USB y transferirse a un ordenador mediante conexión Ethernet o WiFi. Desde el menú se puede acceder fácilmente y consultar el archivo de los ciclos, con la posibilidad de generar un práctico documento en PDF con un resumen de toda la información sobre los ciclos realizados.



Diseño premium

E10 es una joya del diseño. Su forma compacta y el color blanco del armazón realzan los colores de la pantalla de 7". El LED de colores junto al asa actúa como guía luminosa, para proporcionar información inmediata sobre el estado del dispositivo o la fase del ciclo de esterilización y garantizar también una mejor visibilidad de las bandejas durante la carga y descarga.



Eficiente

La bomba de vacío y el sistema de secado de última generación garantizan una esterilización de alto rendimiento y silenciosa. Los filtros de aire impiden la entrada de suciedad en el autoclave, para proteger los componentes internos y su eficacia a lo largo del tiempo.



E10

Potente y conectado, la mejor esterilización

Autoclave clase B intuitivo, Trazable y eficaz: permite la gestión completa de los datos de esterilización, gracias a los mejores sistemas de trazabilidad digital y en papel. Su interfaz intuitiva, con pantalla a color de 7" y el LED de colores situado junto al asa simplifican y agilizan las tareas diarias.

E10 ofrece la posibilidad de seleccionar cinco ciclos de tipo B diferentes y, tras introducir una contraseña, un ciclo de tipo S y N. Además de los ciclos, también permite programar las pruebas de validación, para aprovechar mejor el tiempo útil.

Gracias a la trazabilidad de serie, todos los datos del ciclo se pueden transferir y gestionar cómodamente en un ordenador gracias al software gratuito E-Data. También se pueden instalar tres tipos diferentes de impresoras opcionales para imprimir comprobantes o etiquetas térmicas con datos o códigos de barras.

En E10 todo está diseñado para estar alcance de la mano: se puede acceder fácilmente al compartimento de las impresoras, los filtros de aire se extraen rápidamente con un solo clic para su limpieza o sustitución y las operaciones de ajuste frontal de la ventanilla y de desbloqueo de la puerta son sencillas e inmediatas.

Los sistemas de control y las funciones avanzadas comunes a todos los autoclaves Euronda Pro System garantizan la seguridad de los procesos y los resultados a lo largo del tiempo.

Accesorios incluidos

Portabandejas estándar y cinco bandejas, tubos de vaciado, esponja, asa para extracción de la bandeja, asa para ajustar la puerta, embudo.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase IIb



Dimensiones

46 x 45,5 x 61 cm
(l x al. x an.)



Peso

47,5 kg (18 L) - 50,5 kg
(24 L) (máquina vacía
con portabandejas y
bandejas)



Capacidad de la cámara

18 o 24 L



Tensión de alimentación

230 V | 50/60 Hz



Potencia absorbida

2300 W



Consumo de agua

0,3 L



Conectividad

Incluidos: Ethernet,
USB, WiFi, software
E-Memory y E-Data



CE Ref

SSUT\18L2023
SSUT\24L2023



Intuitivo

E9 se ha desarrollado para facilitar y agilizar las tareas cotidianas. Su pantalla táctil de 4,3", con iconos claros y básicos, simplifica la navegación para tener un control inmediato y completo.



Funcional

E9, meticulosamente diseñado para funcionar de la mejor forma durante mucho tiempo, optimiza procedimientos y consumos, prestando especial atención a agilizar las intervenciones de mantenimiento.



Conectado

Los datos de esterilización pueden guardarse en una tarjeta SD y transferirse a un ordenador mediante conexión Ethernet de serie o wifi opcional. El software E-Memory permite almacenar y gestionar los datos de forma sencilla e inmediata.



Completo

El autoclave E9 ofrece todo lo que una clínica necesita: una interfaz fácil de usar, un sistema de trazabilidad ampliable, un rendimiento sin concesiones y una fiabilidad garantizada a lo largo del tiempo.



E9

Conectado e intuitivo, la esterilización hecha a medida



Autoclave de clase B inmediato, eficiente y fiable que permite la gestión completa y conectada de los datos de esterilización, gracias a los mejores sistemas de trazabilidad digital y en papel. Su interfaz intuitiva, con pantalla a color de 4,3", simplifica y agiliza las tareas diarias.

E9 ofrece la posibilidad de seleccionar cinco ciclos diferentes de tipo B y, tras introducir una contraseña, utilizar dos ciclos de tipo S y N. Además de los ciclos también permite programar las pruebas de verificación, para aprovechar mejor el tiempo útil.

Gracias a la tarjeta SD y la conexión Ethernet incluidas, todos los datos del ciclo se pueden transferir y gestionar cómodamente en un ordenador con el software gratuito E-Memory. Además, la trazabilidad digital se puede completar a través del WiFi opcional. También se pueden instalar en cualquier momento tres tipos diferentes de impresoras opcionales para imprimir comprobantes o etiquetas térmicas con datos o códigos de barras.

Los sistemas de control y las funciones avanzadas comunes a todos los autoclaves Euronda Pro System garantizan la seguridad de los procesos y los resultados a lo largo del tiempo.

Accesorios incluidos

Portabandejas estándar y cinco bandejas, tubos de vaciado, esponja, asa para extracción de la bandeja, asa para ajustar la puerta, embudo.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase IIb



Dimensiones

46 x 43,5 x 61 cm
(l x al. x an.)



Peso

47,5 kg (máquina vacía con portabandejas y bandejas)



Capacidad de la cámara

24 L



Tensión de alimentación

230 V | 50/60 Hz

Potencia absorbida

2300 W

Consumo de agua

0,3 L



Conectividad

Incluidos: Ethernet, tarjeta SD, software E-Memory y E-Data
Opcional: WiFi



CE Ref

SSUT24L2023





Gran capacidad

La cámara de acero inoxidable de 29 litros permite una mayor capacidad de carga con un 45% más de espacio útil que un autoclave de 24 litros. Dispone de 275 cm de espacio lineal disponible para optimizar sus ciclos y reducir el consumo.



Trazable

En EXL se puede elegir entre dos impresoras diferentes, ambas para etiquetas adhesivas: una interna y otra externa para grandes cantidades. Ambas pueden instalarse fácilmente en cualquier momento en la máquina con unos sencillos pasos.



Conectado

La tarjeta SD y la conexión Ethernet de serie permiten que los resultados del proceso de esterilización se puedan archivar, gestionar y visualizar fácilmente en el ordenador gracias al software E-Data y E-Memory.



Eco -friendly

Optimiza el consumo de agua (0,9 litros por ciclo) y de electricidad (3200 W), gracias al generador de vapor instantáneo.



EXL

El autoclave Extra Large

Autoclave clase B satisfacer las necesidades de las clínicas con elevada rotación de pacientes, gracias a una capacidad de carga mejorada. La gran cámara de 29 litros puede albergar hasta cinco bandejas de 55 cm (17 cm más en comparación con un autoclave de 24 litros) con 85 cm más de capacidad de carga total que el estándar.

Permite seleccionar cinco diferentes ciclos de tipo B y, tras introducir una contraseña, un ciclo de tipo S. Además de los ciclos también permite programar las pruebas de validación, para aprovechar al máximo el tiempo.

La trazabilidad está garantizada gracias a la tarjeta SD y a la conexión Ethernet de serie y por la posibilidad de instalar en cualquier momento dos tipos de impresoras opcionales diferentes.

Los sistemas de control y las funciones de los autoclaves Euronda Pro System garantizan la seguridad de los procesos y los resultados a lo largo del tiempo.

Accesorios incluidos

Portabandejas estándar y cinco bandejas, tubos de vaciado, esponja, asa para extracción de la bandeja, asa para ajustar la puerta, embudo.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase IIb



Dimensiones

46 x 45,5 x 85,5 cm
(l x al. x an.)



Peso

62 kg (máquina vacía con portabandejas y bandejas)

Capacidad de la cámara

29 L



Tensión de alimentación

230 V | 50/60 Hz



Potencia absorbida

3200 W

Consumo de agua

0,9 L

Conectividad

Incluidos: Ethernet, tarjeta SD, software E-Memory y E-Dat a



CE Ref

SSUX30L2019





Optimizado

La cámara de 24 litros y el portabandejas con cinco bandejas incluidas garantizan una capacidad de carga óptima en un espacio mínimo. El portabandejas también permite incorporar hasta tres casetes de 1 DIN y tres casetes de ¼ DIN por carga.



Trazable

Además de la tarjeta SD, disponible de serie en E8, se puede elegir entre dos impresoras internas diferentes: una para papel térmico y otra para etiquetas adhesivas. Las dos impresoras se pueden instalar en la parte frontal del autoclave en unos sencillos pasos.



Completo

Ofrece el equilibrio perfecto entre facilidad de uso y rendimiento gracias a los accesorios incluidos de serie, como el portabandejas que incluye cinco bandejas y los sistemas de control de última generación como el conductímetro integrado.



Resistente

Todos los materiales, componentes y acabados están diseñados para durar mucho tiempo. Cada detalle está pensado para ofrecer un autoclave resistente que pueda afrontar el ritmo de trabajo de cualquier clínica.



E8

Eficiente y fiable, la esterilización al alcance de todos

Autoclave de clase B fiable, accesible y fácil de usar: el equilibrio perfecto entre rendimiento y resistencia, potencia y consumo, facilidad de uso y flexibilidad.

Equipado con una pantalla en color de 2,4", permite seleccionar cinco ciclos diferentes de tipo B y, tras introducir una contraseña, utilizar dos ciclos de tipo S y N. Además de los ciclos también permite programar las pruebas de verificación para aprovechar al máximo el tiempo.

Los datos de los ciclos de esterilización pueden transferirse fácilmente a un ordenador, gracias a la tarjeta SD y al software E-Data, ambos incluidos de serie. También se pueden instalar en cualquier momento dos tipos diferentes de impresoras opcionales.

Los sistemas de control y las funciones de los autoclaves Euronda Pro System garantizan la seguridad de los procesos y los resultados a lo largo del tiempo.

Accesorios incluidos

Portabandejas estándar y cinco bandejas, tubos de vaciado, esponja, asa para extracción de la bandeja, asa para ajustar la puerta, embudo.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase IIb



Dimensiones

46 x 45,5 x 61 cm
(l x al. x an.)



Peso

48 kg (máquina vacía con portabandejas y bandeja)



Capacidad de la cámara

24 L



Tensión de alimentación

230 V | 50/60 Hz

Potencia absorbida

2300 W

Consumo de agua

0,3 L



Conectividad

Incluidos: tarjeta SD y software E-Memory



CE Ref

SSU\E24L2018





Sencillo

E-Memory es fácil de usar gracias a su interfaz intuitiva, sus controles esenciales y sus filtros de búsqueda sencillos e inmediatos.



Eficiente

Captura automática de datos para dispositivos con tecnología Ethernet e inalámbricos y copia de seguridad automática de los equipos.



Completo

Ideal para la gestión completa de todos los equipos que intervienen en el proceso de esterilización. Procesa una lista ordenada de ciclos y los filtra por máquina, modelo, número de serie, operador, fecha y resultado.



Innovador

Con las funciones Watch Folder y Technical Support dispondrá de los informes, las certificaciones y las alertas con un solo clic.



E- Memor y

Para una trazabilidad total de su clínica



Software para el almacenamiento, gestión y trazabilidad completa de todos los ciclos y datos de esterilización directamente desde un ordenador. El software obtiene los datos del proceso de esterilización de forma automática, semiautomática o manual, almacenándolos en el ordenador, donde se pueden organizar, buscar, imprimir o enviar por correo electrónico con facilidad.

Permite rastrear y seleccionar toda la información relativa a los ciclos realizados por los distintos dispositivos (termodesinfectadora, selladora y autoclave) que intervienen en el proceso de esterilización.

Fácil de consultar y administrar, permite enviar directamente los ciclos y los datos seleccionados al soporte técnico con tan solo unos clics y generar automáticamente en PDF los informes y certificados con encabezado, logotipo gráfico y datos personales.



Descargar



Accesorios

Portabandejas

E10, E9 y E8



Portabandejas estándar

Portabandejas de acero de forma cuadrada diseñado para introducir cinco bandejas estándar de aluminio (incluidas). Al girarlo 90°, permite colocar tres filas de casetes embolsados. Disponible en la versión de 18 y 24 litros.



Dimensiones

Portabandejas de 18 l: 19,5 x 19,5 x 30 cm (l x al. x an.)

Bandeja de 18 l: 18,5 x 2 x 28 cm (l x al. x an.)

Portabandejas de 24 l: 19,5 x 19,5 x 40 cm (l x al. x an.)

Bandeja de 24 l: 18,5 x 2 x 38 cm (l x al. x an.)



Portabandejas para casetes

El portabandejas convexo de acero permite introducir cinco bandejas estándar de aluminio o, si se gira 90°, cuatro casetes embolsados de 1 DIN y cuatro de ¼ DIN. Disponible sólo en la versión de 24 litros.



Dimensiones

19,5 x 22,5 x 40 cm (l x al. x an.)



Superficie de apoyo universal

Superficie de apoyo de acero indicada para cargas más voluminosas. Para instalar directamente en la caldera, después de retirar el portabandejas suministrado. Disponible en la versión de 18 y 24 litros.



Dimensiones

18 L version: 19,5 x 5,5 x 25 cm (l x al. x an.)

24 L versions: 19,5 x 5,5 x 35 cm (l x al. x an.)

EXL



Portabandejas estándar XL

Portabandejas de acero de forma cuadrada concebido para la introducción de cinco bandejas de aluminio XL. Cada bandeja ofrece 17 cm más que un autoclave de 24 L. Al girarlo 90°, permite tener tres estantes para cassettes embolsados.



Dimensiones

Tray holder: 19,5 x 19,5 x 57 cm (l x al. x an.)

Tray: 18,5 x 2 x 55 cm (l x al. x an.)

Carro



E-Cart

Carro multifunción, compatible con EXL, con amplios estantes regulables con acceso frontal para almacenar el material, compartimento posterior para alojar Aquafilter 1 to 1 o Aquaosmo y estante frontal extraíble.



Dimensiones

51 x 81 x 87 cm (l x al. x an.)

Carro



E-Cart

Carro multifunción, compatible con EXL, con amplios estantes regulables con acceso frontal para almacenar el material, compartimento posterior para alojar Aquafilter 1 to 1 o Aquaosmo y estante frontal extraíble.



Dimensiones

51 x 81 x 87 cm (l x al. x an.)

Accesorios

Print set



Print Set 1

Impresora interna con papel térmico. Compatible con E10, E9 y E8.



Print Set 2

Impresora interna para etiquetas adhesivas, también permite imprimir códigos de barras. Compatible con todos los autoclaves Euronda Pro System.



Print Set 3

Impresora externa para etiquetas adhesivas, ideal para clínicas que requieren grandes cantidades de etiquetas. También se pueden imprimir códigos de barras. Compatible con E10, E9 y EXL.

Sistemas de conectividad



E-Data

Software para conectar todos los equipos Euronda Pro System a su programa de gestión, para poder registrar y realizar un seguimiento de todos los datos. Disponible para los sistemas operativos Windows e iOS y compatible con la mayoría de los programas de gestión del mercado.

Test de control



Helix test

Test de control para autoclaves de Clase B para comprobar la capacidad de penetración del vapor en las cargas huecas.



Envase

Paquete con 1 cánula y 250 viradores de control



CE Ref

Euronda TST Helix Daily Steam Penetration Test 132°C - 137°C

Bowie & Dick test

Test de control para autoclaves que permite comprobar la capacidad de penetración del vapor en cargas porosas.



Envase

Paquete con 10 pruebas



CE Ref

TST Single Use Euronda Bowie Dick Test Pack

Prion test

Prueba de verificación para autoclaves de Clase B. Calibrada según los parámetros de temperatura, tiempo y presión considerados eficaces en la esterilización de los ciclos de 134° Prion.



Envase

Paquete de 200 viradores de control



CE Ref

Emulating TST Control Cycle Verification Indicator 134°C / 18 min



Práctico

No requiere alimentación eléctrica y se puede instalar en la superficie de trabajo o en el interior de un mueble.



Compatible

Aquaosmo se conecta directamente a todos los autoclaves de Clase B gracias al dispositivo Aquabox.



Multiautoclave

Puede alimentar de dos a cuatro autoclaves al mismo tiempo gracias al depósito de almacenamiento de 12 litros y previa instalación del dispositivo Aquabox.



Rápido

Gracias al sistema de filtros, puede desionizar 1 litro de agua en 20 minutos.



Aquaosmo

El sistema de ósmosis avanzado para múltiples autoclaves



Dispositivo para producir agua osmotizada mediante el proceso de ósmosis inversa, ideal para clínicas que utilizan agua con niveles de dureza elevados. El sistema de filtración formado por filtro de sedimentos y filtro de carbón, resina y membrana osmótica, garantiza una producción de agua de alta calidad ideal para abastecer los autoclaves y todos los dispositivos de la clínica de conformidad con la norma EN 13060 ($<15 \mu\text{s/cm}$).

No requiere alimentación eléctrica y se puede instalar directamente en la superficie de trabajo o en el interior de un mueble. Aquaosmo ofrece un excelente rendimiento y fiabilidad de filtración con un impacto medioambiental reducido, gracias al uso de una única resina con una vida útil garantizada de 12 meses.

Accesorios incluidos

Aquabox y depósito de almacenamiento externo.



Dimensiones

30 x 35 x 16 cm (l x al. x an.)



Peso

5,5 kg (en vacío)



Puede alimentar

Hasta 4 autoclaves



Producción de agua

1 L de agua cada 20 minutos



Presión de alimentación

Mín. 2 / máx. 8 bar



Conductividad del agua de entrada

Máx. 800 μs

Accesorios



Aquabox

Permite la conexión de los autoclaves Euronda Pro System a una fuente externa de agua tratada.



Depósito de almacenamiento externo

Permite alimentar de dos a cuatro autoclaves. Capacidad: 12 litros



Boquilla

Boquilla con tubo extensible hasta 80 cm. Se conecta a la salida de Aquaosmo y permite el suministro manual de agua osmotizada.

Aquafilter 1 to 1

El sistema de desionización ideal para un único autoclave



Dispositivo para producir agua desionizada para autoclaves, conforme a la norma EN 13060 ($< 15 \mu\text{S}/\text{cm}$). Permite suministrar agua a un solo autoclave Euronda Pro System.

Desioniza una media de 1 litro de agua por minuto. Se puede equipar con un dispositivo de desconexión automática. Puede colocarse directamente en la superficie de trabajo, dentro del armario o fijado en la pared.

Accesorios incluidos

Dos resinas de intercambio iónico.



Dimensiones

39 x 45,5 x 14,5 cm
(l x al. x an.)



Peso

8,5 kg (en vacío)



Puede alimentar

1 autoclave



Producción de agua

1 litro de agua cada minuto



Presión de alimentación

Máx. 8 bar



Fácil de usar

Un indicador luminoso indica el nivel de conductividad del agua, indicando cuándo es necesario sustituir las resinas.



Fácil de instalar

Gracias a los acoplamientos rápidos permiten la conexión directa al autoclave y a la red de suministro de agua.

Aquadist

Agua destilada lista para cualquier necesidad



Destilador de agua que permite obtener agua destilada por ebullición y la posterior condensación del vapor. Destila 0,7 litros de agua cada hora.



Dimensiones

23 x 36 cm (Øxal.)



Peso

3,5 kg



Producción de agua

0,7 litros de agua cada hora



Potencia absorbida

580 W



Práctico

Fácil de usar, produce agua destilada lista para usar en muy poco tiempo.



Eficaz

Su capacidad de 4 litros hace que sea útil para cubrir varios ciclos de esterilización.



Euronda[®]
Eurosteril

Euronda Eurosteril

Euronda Eurosteril

Pro packaging solutions

Seguridad, eficacia y facilidad de uso: los rollos y bolsas Euronda Eurosteril son el complemento ideal para el proceso de esterilización. Fabricados en Italia con los mejores materiales y los procesos más avanzados, garantizan un sellado hermético constante durante la esterilización, extrema facilidad de apertura sin que se desprendan las fibras ni se rompan y un mantenimiento adecuado de la esterilidad.

Equipados con indicadores químicos, indican a simple vista que la esterilización se ha realizado correctamente.

Mantienen la esterilidad hasta seis meses en condiciones de almacenamiento idóneas y previa validación del proceso de esterilización y de sellado.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase I



Modelos

Rollos de esterilización planos y de fuelle
Bolsas para esterilización termosellables y autosellables

Rollos de esterilización



Rollos de esterilización fabricados con los mejores materiales certificados: papel médico de alto gramaje (60 g/m²) y una doble capa de película de polietileno/polipropileno, de conformidad con el MDR (UE) 2017/745 y la norma EN 868-5.

Los indicadores químicos de color indican, a simple vista, la esterilización correcta. Las operaciones de corte y sellado se normalizan y simplifican gracias a la marca centimétrica del rollo, lo que garantiza la longitud correcta de la bolsa y la eficacia para mantener la esterilidad.

Disponibles en dos versiones:

- planos, disponibles en diferentes tamaños; de fuelle, ideales para envasar objetos e instrumental de grandes dimensiones de la mejor forma posible. Disponible en tres tamaños diferentes.

Mix producto disponible

- Mix Eurosteril : dos rollos de 5 cm, dos rollos de 7,5 cm, un rollo de 10 cm.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase I



Envase

Rollos planos:

- 5 cm x 200 m (8 uds)
- 7,5 cm x 200 m (5 uds)
- 10 cm x 200 m (4 uds)
- 15 cm x 200 m (2 uds)
- 20 cm x 200 m (2 uds)
- 25 cm x 200 m (1 uds)
- 30 cm x 200 m (1 uds)
- 40 cm x 200 m (1 uds)

Rollos de fuelle:

- 20 cm x 5 x 100 m (2 uds)
- 25 cm x 5 x 100 m (1 ud)
- 25 cm x 6,5 x 100 m (1 ud)



CE Ref

STERILIZATION ROLLS



Duraderos

Mantienen la esterilidad hasta seis meses en condiciones de almacenamiento idóneas y previa validación del proceso de esterilización y de sellado.



Seguros

Excelente pelabilidad durante la apertura, sin que se desprendan las fibras del papel ni se desgarre el material plástico.



Eficaces

Las prácticas guías centimetradas, situadas en los laterales de los rodillos, simplifican y normalizan el trabajo diario del operador, para evitar errores, pérdidas de material y de tiempo.

Bolsas de esterilización



Bolsas de esterilización fabricadas con papel médico blanco de alto gramaje (60g/m²) realizado con doble capa de película celeste de polietileno/polipropileno, de conformidad con el reglamento MDR (UE) 2017/745 y la norma EN 868-5.

Tres sellados laterales con canales impermeables y uniformes para garantizar la máxima protección microbica. Equipadas con indicadores químicos de viraje para la esterilización por vapor o gas EO (óxido de etileno). Excelente pelabilidad sin que se desprendan fibras del papel o se produzcan roturas de la película cuando se abre el envase. Producto fabricado en Italia.

Disponibles en dos versiones:

- termosellables clásicas;
- autoselladoras, equipadas con una banda adhesiva de goma sintética y doblez de cierre. Prácticas y fáciles de usar, proporcionan una protección inmediata sin necesidad de utilizar termoselladores.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase I



Envase

Bolsas termosellables: 5 x 25 cm (500 uds) 7,5 x 25 cm (500 uds) 10 x 25 cm (500 uds) Bolsas autoselladoras: 9 x 25 cm (9 paquetes de 200 uds) 14 x 26 cm (6 paquetes de 200 uds) 19 x 33 cm (5 paquetes de 200 uds)



CE Ref

STERILIZATION
POUCHES
SELF ADHESIVE
STERILIZATION
POUCHES



Duraderas

Mantienen la esterilidad durante seis meses en condiciones de almacenamientos idóneas y previa validación del proceso de esterilización y de sellado.



Seguras

Excelente pelabilidad durante la apertura, sin que se desprendan las fibras del papel ni se desgarre el material plástico.



Funcionales

Proporcionan una excelente barrera antimicrobiana y, gracias a los indicadores químicos de viraje, cambian de color indicando a simple vista que la esterilización se ha realizado correctamente.



Euronda[®]
Sanitizer

Euronda Sanitizer

Euronda Sanifizer

The safer & greener choice

Euronda Sanifizer es la gama de productos con un bajo impacto medioambiental para la limpieza y desinfección de Productos Sanitarios como superficies, accesorios e instrumental en la clínica dental.

Gracias a las fórmulas innovadoras, todos los productos Sanifizer garantizan la máxima eficacia y seguridad, y ofrecen gran compatibilidad con los distintos materiales tratados.

Atóxicos, sin perfumes ni sustancias sensibilizantes o alergénicas, se fabrican sin cloro, fenoles, CMR, derivados de aldehídos o nanopartículas. Sus fórmulas de última generación y sus bajas dosis necesarias respetan la salud de los profesionales que los utilizan a diario.

Simplifican y agilizan las operaciones, garantizando total seguridad para los operadores que las utilizan a diario y llevando a las clínicas dentales los mismos estándares de calidad y seguridad que utilizan los centros hospitalarios.



Clasificación

Productos Sanitarios de Clase I, IIa y IIb



Duración

3 años



Espectro de acción

Bactericida, levuricida, micobactericida, viricida, fungicida (solo Sanifizer Instruments y Sanifizer Automatic)

Sanifizer Enzymatic



Sanifizer Enzymatic es el primer producto del mercado que utiliza lisozima, una enzima natural que, en combinación con la proteasa, garantiza una acción de lavado profunda y segura. Su fórmula bio-multienzimática de alcalinidad media es ideal para el lavado automático de Productos Sanitarios.

Está especialmente indicado para eliminar sangre, residuos de tejidos y contaminantes orgánicos de Productos Sanitarios reutilizables. No contiene sustancias nocivas, garantiza un uso seguro y una acción profunda y protege los materiales tratados.

Combinado con Sanifizer Neutralizer asegura un lavado a fondo, respetuoso con el medio ambiente y delicado de todo el instrumental, para garantizar el funcionamiento correcto y prolongar la vida útil del instrumental y de termodesinfectadoras como Eurosafes 60 o Eurosafes 170.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase I



Formato

Bidón de 5 litros



Duración

3 años



Principios activos

Compuesto alcalino, complejo enzimático (lisozima y proteasa)



Compatibilidad

Acero inoxidable, aluminio anodizado, cauchos y plásticos en general, materiales cerámicos, silicona, teflón (PTFE), titanio y vidrio



Envase

Caja de 2 bidones



CE Ref

SANIFIZER ENZYMATIC



Seguro

No contiene hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, metasilicatos, colorantes ni perfumes y está indicado para el uso cotidiano plenamente conforme con las normas de seguridad laboral.



Delicado

Su fórmula garantiza una limpieza óptima de todos los residuos orgánicos a la vez que respeta plenamente los diferentes materiales tratados.



Limpiador

Excelentes resultados de limpieza gracias a la acción sinérgica de la alcalinidad media, los tensioactivos y el complejo limpiador bioenzimático con propiedades hidrolíticas, conservantes, fungistáticas y bacteriostáticas.

Sanifizer Neutralizer



Agente líquido con acción neutralizante y limpiadora para sistemas de lavado automático. Elimina la alcalinidad residual y facilita el secado, reduciendo la opacidad y los arañazos en el instrumental quirúrgico y los Productos Sanitarios.

Combinado con Sanifizer Enzymatic asegura un lavado a fondo, respetuoso con el medio ambiente y delicado de todo el instrumental, para garantizar el funcionamiento correcto y prolongar la vida útil del instrumental y de termodesinfectadoras como Eurosafes 60 o Eurosafes 170.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase I



Formato

Bidón de 5 litros



Duración

3 años



Principios activos

Ácido cítrico, alfa hidroxiácido (AHA)



Compatibilidad

Acero inoxidable, aluminio anodizado, cauchos y plásticos en general, materiales cerámicos, silicona, teflón (PTFE), titanio y vidrio



Envase

Caja de 2 bidones



CE Ref

SANIFIZER NEUTRALIZER



Respetuoso

Gracias al uso de ácidos orgánicos, Sanifizer Neutralizer actúa como desincrustante y ablandador natural, prolongando el funcionamiento y la vida útil del instrumental quirúrgico y los Productos Sanitarios.



Protector

Favorece y potencia la acción limpiadora de Sanifizer Enzymatic a la vez que protege el funcionamiento de la termodesinfectadora gracias a su capacidad para eliminar los iones pesados del agua.



Eco-friendly

Sin fósforo ni tensioactivos, Sanifizer Neutralizer garantiza el máximo respeto del medio ambiente gracias a su fórmula especial a base de ácido cítrico y ácido alfa hidroxi (AHA) de origen natural.

Concentrado

Desarrollado para ofrecer eficacia en bajas concentraciones (0,5 %), requiere una dosis menor, lo que reduce al mínimo los desperdicios y el impacto en el medio ambiente. Una botella sirve para preparar 200 litros de solución.

Rápido

Ideal para el lavado manual, en cubas de descontaminación y cubas de ultrasonidos, actúa en solo 5 minutos para garantizar la desinfección y limpieza del instrumental quirúrgico, endoscopios y Productos Sanitarios.

Doble acción

Asegura una acción limpiadora, gracias a la fórmula con un complejo multienzimático y a las enzimas encapsuladas; y desinfectante, gracias al sistema biocida que garantiza un amplio espectro de acción.



Sanifizer Instruments



Desinfectante y detergente multienzimático indicado para la desinfección y limpieza del instrumental quirúrgico y Productos Sanitarios en cubas de descontaminación, con lavado manual o en cubas de ultrasonidos.

La acción sinérgica de un complejo biocida y un complejo enzimático encapsulado ofrece todas las ventajas de un desinfectante-detergente con una acción profunda pero respetuosa con los materiales tratados. El pH neutro es ideal para tratar incluso los materiales más delicados sin efectos oxidantes ni corrosivos.

Se puede utilizar en fresas e instrumental endodóntico.

La compatibilidad también está garantizada gracias a que la fórmula no contiene cloro, alcohol, fenoles ni aldehídos. No contiene sustancias peligrosas o tóxicas ni produce humos durante su uso, para garantizar la seguridad de los operadores. Es biodegradable al >90 %, por lo que su impacto en el medio ambiente es bajo.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase IIb



Formato

Botella «dosis correcta» de 1 L



Duración

3 años



Principios activos

Amonio cuaternario de 4ª generación, diamina, complejo de 4 enzimas encapsuladas



Compatibilidad

Acero inoxidable, aluminio, polipropileno (PPE), PVC, poliestireno, teflón (PTFE) y policarbonatos



Envase

Caja de 12 botellas



CE Ref

SANIFIZER INSTRUMENTS

Solución	Concentrado	Desinfectant
total 1 L 2 L 3	* 0,5 % 0,5 %	e 5 ml 10 ml
L	0,5 %	15 ml

* La concentración del 0,5 % está indicada para la acción bactericida, fungicida, levuricida y virucida con tiempos de contacto que oscilan entre 5' y 15' dependiendo de la función. Para una acción micobactericida y tuberculicida es necesario elevar la concentración al 2,5 %.

Doble acción

Asegura una acción limpiadora, gracias a la fórmula con un complejo multienzimático y a las enzimas encapsuladas; y desinfectante, gracias al sistema biocida que garantiza un amplio espectro de acción.

Concentrado

Desarrollado para ofrecer eficacia en bajas concentraciones (0,5 %), requiere una dosis menor, lo que reduce al mínimo los desperdicios y el impacto en el medio ambiente. Con una botella se pueden realizar 20 ciclos.

Delicado

Su fórmula especial garantiza una limpieza óptima de todos los residuos orgánicos y una gran compatibilidad, respetando plenamente los diferentes materiales tratados.



Sanifizer Automatic



Desinfectante y detergente multienzimático para la desinfección y limpieza del instrumental quirúrgico y Productos Sanitarios.

Utilizado junto con la cuba multifunción Eurosafe Smart, combina en un solo ciclo la eficacia del lavado con ultrasonidos con la limpieza y desinfección de la carga. El sistema de cartuchos intercambiables permite sustituirlos fácilmente, para garantizar facilidad de uso y seguridad para el operador.

La acción sinérgica de un complejo biocida y un complejo enzimático encapsulado ofrece todas las ventajas de un desinfectante-detergente con una acción profunda, respetando plenamente los materiales tratados.

El pH neutro es ideal para tratar incluso los materiales más delicados sin efectos oxidantes ni corrosivos. La compatibilidad está garantizada gracias a que su fórmula no contiene cloro, alcohol, fenoles ni aldehídos.

No contiene sustancias peligrosas o tóxicas para garantizar la seguridad de los operadores. Es biodegradable al >90 %, por lo que su impacto en el medio ambiente es bajo.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase I Ib



Formato

Botella de 1 L



Duración

3 años



Principios activos

Amonio cuaternario de 4ª generación, diamina, complejo multienzimático



Compatibilidad

Acero inoxidable, aluminio, polipropileno (PPE), PVC, poliestireno, teflón (PTFE) y policarbonatos.



Envase

Caja de 12 botellas



CE Ref

SANIFIZER AUTOMATIC

Sanifizer Sur faces



Desinfectante hidroalcohólico para la desinfección y limpieza de Productos Sanitarios no invasivos, mobiliario y equipos.

El amplio espectro de acción, la eficacia instantánea y el secado rápido simplifican y aceleran los protocolos, para mejorar la repetibilidad y estandarización.

La composición baja en alcohol (48 %) ofrece el equilibrio perfecto entre rapidez de uso, compatibilidad y seguridad. Esto es posible gracias a la combinación de diferentes principios activos que, al interactuar en sinergia, garantizan una elevada eficacia en dosis bajas, para garantizar la seguridad de los usuarios y proteger las superficies tratadas contra la pérdida de brillo, la corrosión y el envejecimiento. Se puede utilizar en el instrumental odontológico utilizado durante las visita, incluidas fresas.

La boquilla espumadora disminuye la volatilidad del producto, para reducir los desperdicios; también permite utilizar Sanifizer Surfaces desde diferentes ángulos.



Seguro

Atóxico, sin sustancias cancerígenas, mutágenas, reprotóxicas ni sensibilizantes (perfumes, colorantes), es compatible con una gran variedad de materiales y garantiza la máxima seguridad.



Inmediato

Listo para usar gracias a la cómoda boquilla espumadora, llega a todas las superficies, se seca rápidamente y no necesita enjuague.



Respetuoso

Fabricado con materias primas de calidad farmacéutica y fórmulas innovadoras, reduce la dosis de alcohol necesaria manteniendo inalterada la eficacia, para un rendimiento, compatibilidad y seguridad superiores.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase IIa



Formato

Botella de 0,75 L



Duración

3 años



Principios activos

Amonio cuaternario de 4ª generación, alcohol 48 %



Compatibilidad

Acero inoxidable, aluminio, zinc, cobre, polipropileno (PPE), PVC, poliestireno, teflón (PTFE) y policarbonatos



Envase

Caja de 12 botellas



CE Ref

SANIFIZER SURFACES

Sanifizer Wipes



Toallitas desinfectantes ideales para la desinfección y limpieza de Productos Sanitarios no invasivos, mobiliario y equipos. Humedecidas con la cantidad correcta de sustancia, están listas para usar, actúan en segundos y no necesitan enjuague de las superficies.

Simplifican y agilizan los protocolos, mejorando la repetibilidad y la estandarización, gracias también al práctico envase con tapón abrefácil que protege el producto, para evitar desperdicios y derrames de líquido.

Garantizan seguridad en el entorno de trabajo y para los usuarios, ya que no contienen sustancias nocivas y el contenido en alcohol es bajo, gracias a la combinación de principios activos que actúan en sinergia para asegurar una elevada eficacia en dosis bajas. Garantizan la resistencia al desgarro, sin dejar residuos tras el uso.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase IIa



Dimensiones

Toallita: 15 x 19 cm



Duración

3 años



Principios activos

Amonio cuaternario de 4ª generación, clorhexidina, alcohol 16 %



Compatibilidad

Acero inoxidable, aluminio, polietileno, PVC, poliestireno, teflón (PTFE) y policarbonatos



Envase

Envase de 100 servilletas
Caja de 12 envases



CE Ref

SANIFIZER WIPES



Eficaces

Antidesgarro y ya humedecidas, garantizan una limpieza rápida y profunda sin dejar residuos.



Prácticas

El tapón con abrefácil mantiene las servilletas siempre húmedas y permite extraer una sola toallita cada vez, para reducir el riesgo de contaminación cruzada y evitar desperdicios.



Eco -friendly

Fabricadas con TNT de alta calidad, biodegradable y biocompostable, y empapadas en una solución biodegradable al >90 %. El paquete es de PET reciclable.



Euronda[®]
Stools

Euronda Stools

Euronda Stools

Comfortable & stylish

La gama de taburetes Euronda incluye tres versiones, diseñadas para responder a cualquier necesidad. Onyx, Coral y CDS301 son perfectos para quien pasa muchas horas sentado gracias al respaldo envolvente y anatómicamente ajustable en altura, profundidad y posición, el cómodo asiento y la estructura estable con ruedas autofrenantes.

El asiento y el respaldo pueden personalizarse en distintos materiales y muchos colores, termoconformados o cosidos.



Taburete CDS 301



Estructura de acero cromado con base de cinco radios, equipado con cinco ruedas autogiratorias. El cómodo mecanismo integrado en la parte inferior del asiento, se puede accionar a 360° con ambas manos, evitando la búsqueda de palancas y botones durante las intervenciones. El respaldo cómodo y anatómico es de altura, profundidad y posición ajustable. Permite mantener una posición de trabajo relajada, reduciendo la carga sobre la espalda, la pelvis y las piernas. Superficies lisas para una máxima higiene y limpieza.



Colores

Numerosos colores disponibles



Modelos

Termoconformados o cosidos



Dimensiones

Asiento redondo:
40 x 10 cm (Ø x a)
Altura regulable:
51 – 69 cm



Peso

15 kg



Taburete Coral



Estructura de poliamida extruida reciclable, ignífugo, resistente a los arañazos y a los impactos, equipado con cinco ruedas autobloqueantes. El mecanismo de funcionamiento está cubierto con una tapa especial. Integrado en la parte inferior del asiento, se puede accionar a 360° con ambas manos, evitando la búsqueda de palancas y botones durante las intervenciones. El respaldo cómodo y anatómico se puede ajustar en tres posiciones diferentes mientras el asiento es en poliuretano indeformable tapizado.



Colores

Numerosos colores disponibles



Modelos

Termoconformados o cosidos



Dimensiones

Asiento redondo:
39 x 9 cm (Ø x a)
Altura regulable:
52 – 70 cm



Peso

13 kg



Taburete Onyx



Estructura de aluminio con cinco radios. Altura regulable gracias a la palanca situada bajo el asiento, que se puede accionar a 360°. Asiento redondo y respaldo cómodo y anatómico, ajustable en tres posiciones (derecha, central e izquierda) y también en profundidad.



Colores

Numerosos colores disponibles



Modelos

Termoconformados o cosidos



Dimensiones

Asiento redondo:
39 x 9 cm (Ø x a)
Diametro base: 58 cm
Altura regulable:
50 - 65 cm



Peso

11 kg



Euronda Spa© 2025

No está permitido copiar, reproducir o escanear este catálogo con ningún medio. Todos los derechos reservados.

Las imágenes, descripciones, citas, dimensiones y características técnicas deben considerarse indicativas.

Incluso manteniendo las características básicas del producto, el fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento con el único propósito de mejorar el producto.

Euronda Spa Via
Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy **t f**
m +39 0444 656111
+39 0444 656199
info@euronda.com

www.euronda.it Deutschland
Euronda Deutschland Am
Landwehrbach 5 48341
Altenberge, Deutschland **t f m**

+49 2505 9389 0
+49 2505 9389 29
info@euronda.de

www.euronda.de

France

Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville, France

t + 33 (0) 3 44 06 69 70
m info@euronda.fr

www.euronda.fr

España

Identyd
Calle Músico Antonio Rodríguez
de Hita, 12 Bajo 30007 Murcia
España

t 900102034
m info@euronda.es

www.euronda.es