

**Dents
Mind**

RUMAR
mayorista dental

TienDental

SWIFT
SCAN



 **WOODPECKER**

ESP

DENTSMIND

[SWIFT SCAN]

33 FPS Escaneo a Alta Velocidad de

El escaneo a 33 fotogramas por segundo, combinado con el procesamiento del software, mejora la eficiencia en el escaneo y el modelado.

2 Puntas para Diferentes Necesidades

Opciones de puntas grandes y pequeñas que se adaptan a distintas cavidades orales, optimizando la comodidad y la versatilidad clínica.

15µm Precisión de

La optimización de algoritmos de alta precisión permite una exactitud de escaneo de arco completo de hasta 15 µm, garantizando una excelente reproducción del modelo y la fiabilidad de los datos.

210g Diseño Ligero de

Diseño liviano con doble botón ergonómico que permite un uso cómodo y una operación flexible.

20mm Campo de Visión Profundo de


Cubre fácilmente zonas como los molares posteriores y las muelas del juicio gracias a su gran profundidad de campo, facilitando el manejo de estructuras intraorales complejas.


Esterilización UV Automática

La esterilización UV incorporada se activa en modo de reposo para garantizar la higiene y prevenir la contaminación cruzada.

Sin Necesidad de Calibración

Sistema altamente estable, sin necesidad de calibración, lo que reduce la complejidad operativa y los costes de mantenimiento. Auto UV Sterilizat

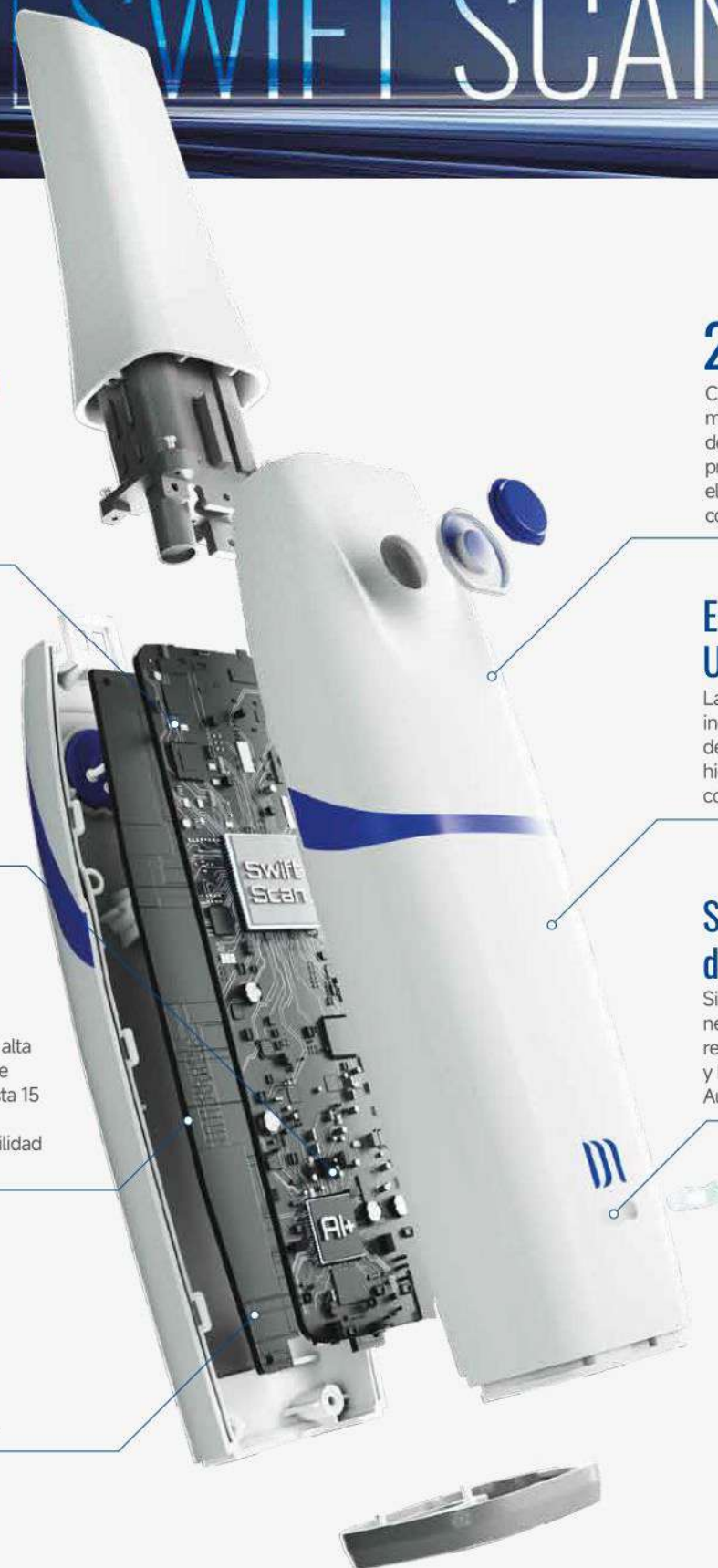

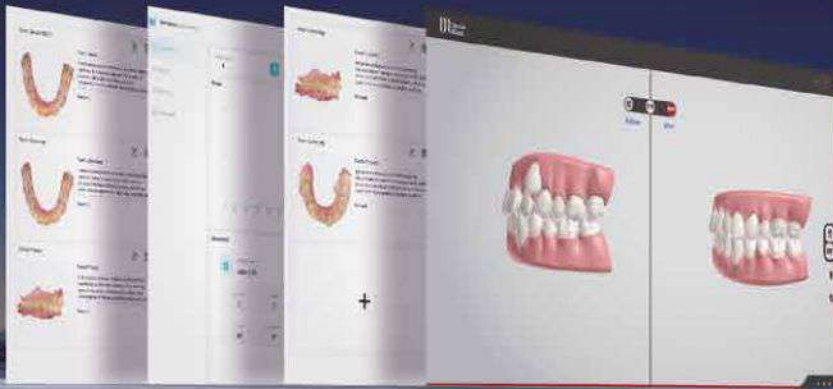


Identificación de Tejido Blando con IA



Filtra en tiempo real las zonas no deseadas, como las mejillas y la lengua.

Reconocimiento Automático de Escenarios

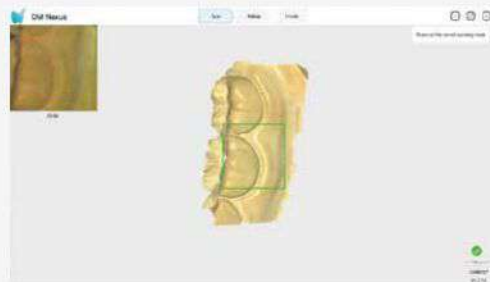


Detecta automáticamente escenarios intraorales y extraorales y sugiere el modo de escaneo óptimo.

Adaptación a Materiales Complejos




La IA identifica superficies complejas como coronas metálicas, cuerpos de escaneo y cerámicas, y ajusta los algoritmos de escaneo para asegurar estabilidad y captación de detalles.

Simulación Ortodóntica con un Solo Clic

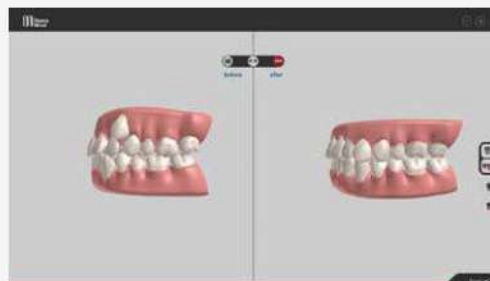

Genera de forma instantánea simulaciones de tratamiento ortodóntico para mejorar la comprensión del paciente.

Exportación de Resultados con un Solo Clic

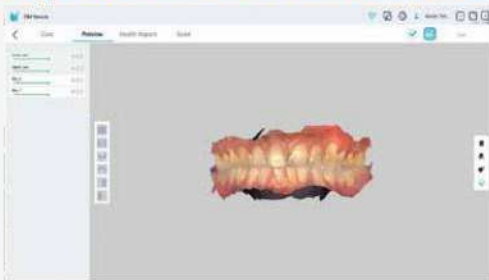

Con un solo clic, exporta los datos de escaneo que pueden ser accedidos instantáneamente mediante un código QR, mejorando la comunicación con el paciente y la eficiencia clínica.



Plataforma de Servicios en la Nube DM Nexus



Conectividad en la Nube y Colaboración Fluida

- Sincronización instantánea con laboratorios a través de la nube.
- Compartir datos con un clic para una colaboración eficiente.



Panel de Gestión de Datos Inteligente

- Información empresarial visualizada mediante gráficos intuitivos.
- Vista general en tiempo real del desempeño operativo.



Compatibilidad Multiplataforma y Modo Sin Conexión

- Accede a tu cuenta desde PC, web o dispositivo móvil.
- Escanea y opera sin interrupciones incluso sin conexión a Internet.

Pieza de Mano

Tamaño 175.1 x 45.6 x 38mm±5mm
Peso 210g

Calibración No requiere calibración

Control remoto Sí

Fuente de alimentación auxiliar No

Punta

Punta 22 x 18 mm (grande), 18 x 16 mm (pequeña)
Esterilización por vapor Hasta 150 veces a 134°C durante 3-6 minutos

Scanning

Scanning precision of entire arch 15 µm
Botones Botones dobles

Recommended System Requirements

CPU	Intel Core i7-12700H
Tarjeta Gráfica	NVIDIA RTX3060
Memoria	32GB
Disco Duro	1TB SSD
Sistema Operativo	Win10 / Win11 64bit
Conector	USB 3.0
Pantalla	1920*1080 60Hz



Guilin Kevin Peter technology Co., Ltd. - DM DentsMind
Lado norte de Linsu Rd, Lingui Town, Distrito Lingui, Guilin, Guangxi
541100, R. P. China

TienDental Productos Dentales S.L Calle Ferraz 42. 28008 Madrid
918 13 81 81 / info@tiendental.com / www.tiendental.com

Su distribuidor de confianza

TienDental